



**Sicuro.**

Il manipolo discreto si integra facilmente al tuo riunito. Ha un sistema di sicurezza per riposizionare i tuoi aghi senza alcun rischio di contagio.



**Luce di resistenza all'iniezione.**

La luce sull'impugnatura del manipolo indica la resistenza all'iniezione per controllare perfettamente la tua anestesia.



**Conveniente.**

Tutti gli accessori sono autoclavabili (134°/275°F), le cartucce e gli aghi sono standard, minimizzando i costi per l'operatore.

**SleeperOne®**  
ulteriori vantaggi



**DENTAL HI TEC**

La nostra missione: l'anestesia dentale

ZI de l'Appentière - 49280 Mazières en Mauves - FRANCE  
Tel: +33 241 560 590 - Fax: +33 241 561 615  
mail@dentalhitec.com

Dealer di zona

La soluzione  
**SleeperOne®**

indolore  
preciso  
confortevole



Photos: DHT / Stéphane Rivier



**DENTAL HI TEC**

La nostra missione: l'anestesia dentale

# La soluzione SleeperOne ti offre il meglio

Combinando l'alta qualità degli aghi, una qualità senza pari e l'iniezione elettronica: SleeperOne è il più efficace sistema per un'anestesia indolore, efficiente e confortevole.



SleeperOne è fornita con gli AGHI DHT **Needles**



Precisione pari alla tua turbina.

## Aghi Hi-Tec brevettati per eliminare il dolore

SleeperOne è fornita con gli **AGHI DHT**.

Questi particolari aghi brevettati hanno due importanti vantaggi:

- Il loro esclusivo angolo è simile alla **lama di un bisturi**. I tessuti non sono più strappati ma incisi. Gli aghi penetrano **più a fondo senza piegarsi**.

È possibile eseguire l'anestesia intraligamentare e l'intrasettale in modo più veloce ed efficace.

- Il segno specifico sul cappuccio dell'ago aiuta a trovare la corretta inclinazione.

L'ago penetra più facilmente e con una profondità minore per prevenire di toccare il periostio.

L'anestesia nelle mucose, l'infiltrazione e l'anestesia palatina sono indolori.

## Precisione impareggiabile per un maggiore comfort ed una maggiore efficienza

SleeperOne è un **sistema a forma di penna**, molto leggero (71g), che permette un'impugnatura molto vicina all'ago.

Ti permette di lavorare sfruttando **punti di appoggio** senza dover effettuare manualmente l'iniezione.

Le anestesi intraligamentari e intrasettali sono **più facili, più profonde, senza torsione dell'ago e senza perdite di tempo!**

Le anestesi nel blocco nervoso sono precise.

L'anestesia palatina e l'iniezione nell'attacco della mucosa sono **indolori**

poiché si rimane nello strato superficiale del tessuto con una velocità d'iniezione perfettamente controllata.

## Un'iniezione totalmente controllata

Le iniezioni con SleeperOne sono progressive e molto più prevedibili rispetto all'iniezione manuale effettuata con siringhe.

Le 4 velocità progressive sono adattabili a tutte le anestesi.



La pressione di iniezione è controllata continuamente per limitare il dolore.

L'anestesia intraligamentare e intrasettale sono **eseguite lentamente, senza sforzo muscolare e sono indolore**.

L'infiltrazione e l'anestesia palatina sono **realmente indolore**.



Riduzione della profondità di penetrazione e penetrazione indolore.

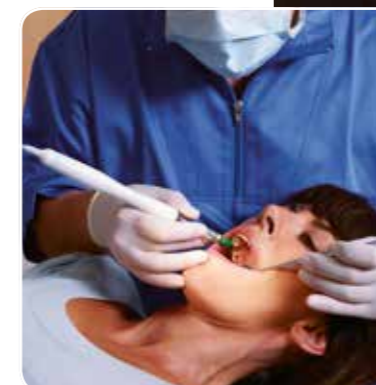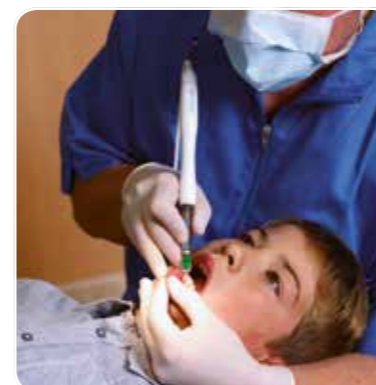

Punti di appoggio e iniezione controllata per una maggiore efficacia e comfort per il paziente.



**Pedale wireless senza batteria!**

L'energia necessaria si produce premendo il pedale.

Nessuna batteria da cambiare, nessun indicatore di carica da controllare.

